

# Prestan Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Ενήλικα Α' Βοηθειών με Led Μετρονόμο και Τσάντα Μεταφοράς.



**€233.06**

Αγορά



## Περιγραφή


Ολοκληρωμένη ρεαλιστική εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και στην ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ με εκπαιδευτικό αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED TRAINER).

Απόλυτα ρεαλιστικό πρόπλασμα στο μάτι και την αφή. Το Επαγγελματικό Ανδρείκελο Ενήλικα PRESTAN ADULT είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο στην αγορά καθώς διαθέτει φωτεινό μετρονόμο ενδείξεων ορθών ή λαθεμένων σε ρυθμό και εύρος θωρακικών συμπίεσεων. Διατίθεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς BLS / AED.

<b>Sleep Mode/No Power</b>	○ ○ ○ ○
<b>1<sup>st</sup> Full Compression</b> (Wake mode/LED Test Mode)	● ● ● ●
<b>CPM* &lt; 60</b>	○ ● ○ ○
<b>CPM* 60 – 79</b>	○ ○ ● ○
<b>CPM* 80 – 99</b>	● ○ ○ ○
<b>CPM* 100 - 120</b>	● ○ ○ ●
<b>CPM* &gt; 120</b>	● ○ ● ●
<b>Compressions Stopped</b>	○ ● ○ ○

\*CPM = Compressions per minute

● = Flashing

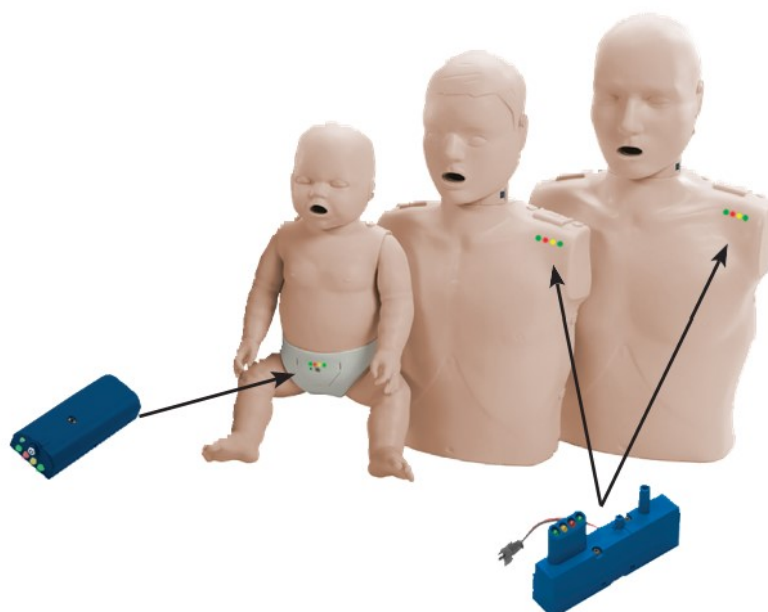

Η νέα επαναστατική οθόνη δεικτών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (LED ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ CPR - ΚΑΡΠΑ) επιτρέπει την άμεση πληροφόρηση τόσο του εκπαιδευτή όσο και του εκπαιδευόμενου σχετικά με το βάθος της πίεσης στο στήθος καθώς και τον ρυθμό. Αυτό βοηθά κάθε μαθητή να αντιλαμβάνεται κατά την εκπαίδευση, το ορθό εύρος και ρυθμό των συμπίεσεων και να αυτοδιορθώνεται. Επίσης, επιτρέπει στον εκπαιδευτή να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλούς μαθητές γρήγορα και εύκολα από απόσταση. Οι ενδείξεις μεταβάλλονται χρωματικά ανάλογα το εύρος και τον ρυθμό των θωρακικών συμπίεσεων με τον παρακάτω τρόπο:

- Ο μετρονόμος αποτελείται από τέσσερα LED που βρίσκονται τοποθετημένα στον αριστερό ώμο. Όταν ο εκπαιδευόμενος ξεκινάει τις θωρακικές συμπίεσεις, η ένδειξη του μετρονόμου γίνεται κόκκινη εφόσον ο ρυθμός των συμπίεσεων είναι μεταξύ 0-60 συμπίεσεις ανά λεπτό. Καθώς ο μαθητής αυξάνει τον ρυθμό, η ένδειξη αλλάζει σε κίτρινη όταν ο ρυθμός πλησιάζει τις 80 συμπίεσεις ανά λεπτό. Όταν ο ρυθμός είναι μεταξύ 80-100 ανάβει ένα λαμπάκι πράσινο. Μόλις ο ρυθμός γίνει 100 έως 120 συμπίεσεις ανά λεπτό τότε δυο πράσινες ενδείξεις ενεργοποιούνται. Τέλος, όταν ο ρυθμός είναι μεγαλύτερος από 120 θωρακικές συμπίεσεις μαζί με τις δύο πράσινες ενδείξεις αναβοσβήνει και μία κίτρινη.
- Σε περίπτωση που το βάθος των συμπίεσεων δεν είναι το σωστό, όλες οι ενδείξεις απενεργοποιούνται και ξεκινάει να αναβοσβήνει το κόκκινο LED.

Με πατέντα όπου το κεφάλι παίρνει κλίση προκειμένου να ανοίξει ο αεραγωγός (έκταση κεφαλής), το Επαγγελματικό Ανδρείκελο PRESTAN Ενήλικα προσομοιώνει τον τρόπο που το κεφάλι ενός πραγματικού θύματος θα ανασηκωθεί αν απαιτείται ΚΑΡΠΑ. Οι εμφυσήσεις του εκπαιδευόμενου στη σακούλα πνεύμονα (προσομοίωση πνεύμονα ενήλικα) επιτυγχάνονται μόνο όταν το κεφάλι ανασηκωθεί με τον σωστό τρόπο. Τότε και μόνο τότε γίνεται εμφανής η ανασήκωση του θώρακα από τον αέρα που εισέρχεται στη σακούλα πνεύμονα. Επιπλέον, η μοναδική κατασκευή του προπλάσματος PRESTAN ενήλικα, ενσωματώνει ένα μηχανισμό (clicker) βοηθά στην εφαρμογή σωστής δύναμης θωρακικών συμπίεσεων. Ο μηχανισμός αυτός (clicker) περιλαμβάνει ηχητικό μήνυμα ορθής θωρακικής συμπίεσης (μηχανικό κλικ) ενώ συνδυάζεται με τον φωτεινό μετρονόμο.

Τέλος, το δέρμα του προπλάσματος PRESTAN ADULT πέρα από τη ρεαλιστική ανθρώπινη υφή είναι ιδανικό για εκπαίδευση απινίδωσης με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή καθώς έχει την ιδιότητα να προστατεύει από φθορά τα ηλεκτρόδια σε κάθε χρήση.

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PRESTAN ΕΝΗΛΙΚΑ**

- Ρεαλιστική όψη μεγέθους ενήλικα
- Απόλυτα ρεαλιστική συμπίεση στήθους καθώς και ανόρθωση στήθους στις εμφυσήσεις
- Η σακούλα πνεύμονα και η μάσκα προσώπου ασφαρίζονται σε ειδικές εγκοπές ώστε να μην γλιστράνε
- Εύκολη τοποθέτηση σακούλας πνεύμονα
- Η πλήρης συμπίεση στήθους και η σακούλα πνεύμονα διασφαλίζει ότι οι μαθητές λαμβάνουν την πιο ακριβή και ρεαλιστική εκπαίδευση
- Βοηθά τους μαθητές να παίρνουν την εμπειρία εκμάθησης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σοβαρά καθώς σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης το πρόπλασμα δεν λειτουργεί και ενημερώνει με τις διάφορες ενδείξεις
- Ηχητικός μηχανισμός Κλίκ (clicker) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές δίνουν επαρκείς θωρακικές συμπίεσεις σε εύρος και ρυθμό
- Η κλίση στο κεφάλι είναι υποχρεωτικά ορθή για να ανοίξει ο αεραγωγός και να εισέλθει αέρας στη σακούλα πνεύμονα
- Περιλαμβάνει οθόνη LED καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (μετρονόμος θωρακικών συμπίεσεων)

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

- Πρόπλασμα PRESTAN ADULT με μετρονόμο
- 10x σακούλες πνευμόνων
- Τσάντα μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως πανί για να γονατίσει ο εκπαιδευόμενος κατά την εκτέλεση ΚΑΡΠΑ
- Οδηγίες χρήσης

Διαστάσεις συσκευασίας: 36 x 59 x 17 cm

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΡΙΩΝ (3)  
ΕΤΩΝ

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025